

LA CONVALESCENZA POST-INTERVENTO È MOLTO DELICATA

A intervento concluso, inizia una fase fondamentale per la riuscita dell'operazione: la convalescenza. È durante la convalescenza che il piede ha assoluta necessità di rimanere in una determinata posizione, di essere scarico dal peso del corpo, di non effettuare movimenti che potrebbero inficiare la guarigione. Ed è necessario il giusto ausilio.

LE ORTESI POST-OPERATORIE PER PIEDE: SCOPI APPLICATIVI

Sono state progettate appositamente per accogliere un piede gonfio e dolente dopo l'operazione. Danno supporto dove serve ma nello stesso tempo anche comfort e rassicurazione. Proteggono le strutture lese dagli urti accidentali, le alleggeriscono dal peso, pur favorendo una deambulazione precoce che è oggi un protocollo di dimostrata utilità. E infondono un piacevole senso di sicurezza per la tenuta su strada.

L'ortesi per piede accompagna il paziente per tutto il percorso post-operatorio e per questo massima attenzione è stata posta nella scelta di materiali di ottima qualità e di un design che permette l'adattarsi ai progressivi miglioramenti del piede, come ad esempio il ridursi dell'edema.

Le ortesi post-operatorie per piede Darco, eccellenza nel settore, sono state selezionate da Orthoservice perché sono dei veri e propri tutori, che assicurano la massima tollerabilità e il comfort migliore per un recupero più efficace.

9DCDPR001431TA03_0920

Ortesi post-operatorie per piede

DARCO



MedSurg Pro®

Codice	U.MS-W (donna)		
Taglia	S	M	L
Numero	34/36.5	37/38.5	39/41
Colore	nero		

Ambidestro
Option - soletta a incastro modulare U.SI-W (taglie S,M,L)

Codice	U.MS-M (uomo)			
Taglia	S	M	L	XL
Numero	39/41	41.5/43	43.5/45	45.5/47
Colore	nero			

Ambidestro
Option - soletta a incastro modulare U.SI-M (taglie S,M,L,XL)



OrthoWedge

Codice	U.OW-ST				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Numero	33.5/37	37.5/39.5	40/41.5	42/44	44.5/47
Colore	nero				

Ambidestro



HeelWedge

Codice	U.HW-ST				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Numero	33.5/37	37.5/39.5	40/41.5	42/44	44.5/47
Colore	nero				

Ambidestro



DARCO International, Inc.
810 Memorial Blvd · Huntington, WV 25701
Phone 304.522.4883 · Fax 304.522.0037
www.darcointernational.com



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18 · 82399 Raisting, Germany
Tel. 0049 (0) 8807 9228 -0 · Fax -22
info@darco.de · www.darco.de

Distribuito da: RO+TEN s.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7
I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland

INDICAZIONI

MedSurg Pro®

- Post-operatorio per stabilizzazione e scarico del piede (es. osteotomie del piede, alluce valgo, ...)

OrthoWedge

- Ortesi post-operatoria per scarico avampiede

HeelWedge

- Post-operatorio dopo interventi sia ai tessuti molli che ossei del tallone
- Sgravio selettivo della pressione dopo fratture
- Risanamento da ulcerazioni del retro piede

CONTROINDICAZIONI

Al momento nessuna conosciuta

Distribuito in Italia da



www.orthoservice.com



Ortesi post-operatorie per piede

DARCO



Distribuito in Italia da



DARCO MedSurg Pro®

MedSurg Pro® è un'ortesi per piede che garantisce stabilizzazione post-operatoria e scarico dopo intervento chirurgico, con design e funzionalità superiori. È dotata di una tomaia leggera e traspirante e di una morbida fodera per il massimo comfort. I passanti per cinturino su entrambi i lati consentono un facile utilizzo delle cinghie di protezione.

DARCO OrthoWedge

L'ortesi post-operatoria OrthoWedge è stata appositamente progettata per scaricare l'avampiede, riducendo del 57% la pressione dalla testa del metatarso. I cinturini in velcro facilitano l'apertura e consentono una comoda calzatura. Riducendo la pressione sull'avampiede, la guarigione è più rapida dopo interventi chirurgici, traumi o in presenza di ferite o ulcerazioni.

DARCO HeelWedge


HeelWedge è un'ortesi per piede dal peso ridotto, progettata per proteggere il tallone riducendo in modo significativo la pressione. La suola esercita un'azione assorbente. La forma quadrata accoglie comodamente il piede fasciato. La chiusura modificata è ambidestra. La suola può essere estratta e adattata.

ORTESI CURATIVA

- **SUOLA**
 - Forma anteriore squadrata per una migliore protezione delle dita
 - Profilo a barchetta che facilita la rollata del piede
 - Riduzione della pressione su tallone e avampiede
 - Rigidità garantita all'avampiede
 - Antiscivolo
- **TOMAIA**
 - Copertura leggera e traspirante
 - Ampio contrafforte posteriore per una migliore stabilizzazione del retro piede
 - Ampia apertura per una facile calzatura
- **CHIUSURA**
 - Cinturino a Velcro® sul collo del piede con passanti su entrambi i lati
 - Elemento rimovibile sull'avampiede, senza fibbie, per una pressione ridotta
- Nessuna compensazione in altezza necessaria sull'arto controlaterale; a basso profilo
- Ambidestra

PRESSIONE RIDOTTA SULLA PIANTA DEL PIEDE


Scarpa neutra/normale MedSurg Pro®

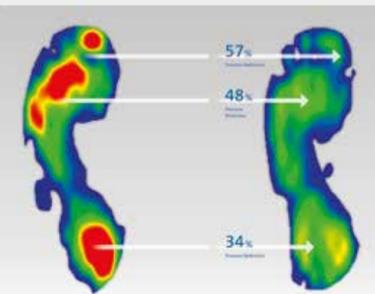

OPZIONALE - SOLETTA A INCASTRO MODULARE

Ridistribuisce la pressione plantare e trova impiego soprattutto dopo operazioni dell'avampiede e del metatarso. Costituita da due solette complete di diversa densità, con moduli completamente intercambiabili fra loro per ottenere una distribuzione della pressione secondo le esigenze del paziente.

Moduli: per mignolo, per alluce, intermedio.

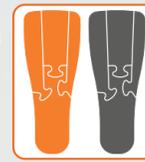

ORTESI DI SCARICO AVAMPIEDE

- Scarico della pressione dall'avampiede grazie alla suola a cuneo 15°
- Punta quadrata per proteggere le dita
- Cinturino alla caviglia per fissare saldamente il piede, riducendo lo slittamento del tallone ed eliminando l'attrito.
- Chiusura rimovibile a livello dell'avampiede per eliminare la pressione della fibbia.
- Suola con battistrada ad alto grip nella parte mediana dove è maggiormente necessaria la trazione.
- Soletta in EVA con imbottitura doppia. Rimovibile, può essere adattata ad esigenze specifiche o sostituita.
- Ambidestra

ORTESI DI SCARICO RETROPIEDE

- Scarico selettivo della pressione dal tallone
- Forma quadrata per bendaggi anche voluminosi
- Punta quadrata per proteggere le dita
- Cinturino anti-slittamento alla caviglia
- Chiusura rimovibile dell'avampiede, senza fibbie, per una pressione ridotta
- Suola con battistrada ad alto grip sotto al mesopiede
- Soletta in EVA con imbottitura doppia, modificabile
- Ambidestra