



sat
MEDICALORTHO®

Il sostegno della schiena
ha un alleato in più.

 ROFTEN
stare meglio fa bene

Sicuro e confortevole come un abbraccio.

I Sat sono busti semirigidi che svolgono due funzioni apparentemente contraddittorie, come l'adattabilità e il contenimento, in modo ineccepibile.

Grazie a un design anatomicamente evoluto, alla scelta di un tessuto unico, e alla particolare configurazione dei tiranti elastici e delle stecche rigide,

sostengono il rachide scaricando sull'addome parte del peso che grava su di lui.

Ogni centimetro del busto aderisce al corpo in modo perfetto, assicurando sollievo e un piacevole senso di protezione.



Nuovo Sat semirigido per addome prominente.

È il modello di ultima generazione, progettato per i casi di addome prominente, che garantisce supporto, comfort e perfetta adattabilità all'anatomia del singolo paziente. La particolare sagomatura strutturale "accoglie" l'addome trasformando la sua presenza in un punto di forza.

Grazie al tipo di tessuto, alla presenza delle stecche paravertebrali e dei tiranti elastici, l'addome contribuisce a sostenere il rachide in modo efficace, dando immediato sollievo. Per evitare ogni fastidiosa compressione, i tiranti sono strutturati per chiudersi nella parte inferiore dell'addome.



Nuova chiusura laterale con tasca di accompagnamento

La banda destra è dotata esteriormente di un inserto a tasca. Infilando la mano all'interno della tasca, il paziente può posizionare correttamente il busto e "accompagnare" la banda di destra sul velcro di chiusura, ottenendo, col minimo sforzo, la chiusura ottimale.



sat

Busto
per addome prominente

PR1-1353 uomo
PR1-1321 donna



Striscia centrale,
sulla linea sterno-pubica, per facilitare
il posizionamento del busto.

Sagomatura speciale, per favorire
il comfort e l'aderenza.

Tessuto traspirante
semirigido (3% elastan).

Bordatura indemagliabile:
non si danneggia all'eventuale
contatto col velcro.

Per la donna:
modello con maggiore
circonferenza bacino.

Per l'uomo:
modello con maggiore
circonferenza giro-vita.

busti semirigidi con tiranti

novità



Da oggi su tutta la gamma più stecche rigide paravertebrali addizionali

La zona para-vertebrale è ora dotata di 4 guide preconfezionate (non più solo 2) per l'inserimento di un massimo di 4 stecche rigide automodellanti addizionali (su richiesta).

Grazie alle apposite guide, le stecche, se prescritte, possono essere facilmente inserite e tolte, assicurando un'azione aggiuntiva di sostegno, sicurezza e benessere su misura per ogni singolo paziente.

Stecche addizionali

codice: 9 ST 012

| | |
|-------|--|
| cm 26 | PR1-1323 / PR1-1355 |
| cm 30 | PR1-1322 / PR1-1354 PR1-1321 / PR1-1353 |
| cm 38 | PR1-1336 / PR1-1335 |



Sistema di chiusura a verricelli

I tiranti elastici sono provvisti di un sistema di verricelli in serie che, a parità di forza di trazione, raddoppiano la forza della chiusura. Non solo! Il loro allineamento in verticale consente anche un'ulteriore regolazione grazie alla formazione di una *pinça* che si restringe e allarga, seguendo le linee anatomiche del paziente.

in elastico

Busto basso

PR1-1355 uomo



PR1-1323 donna



Busto alto

PR1-1354 uomo

PR1-1322 donna

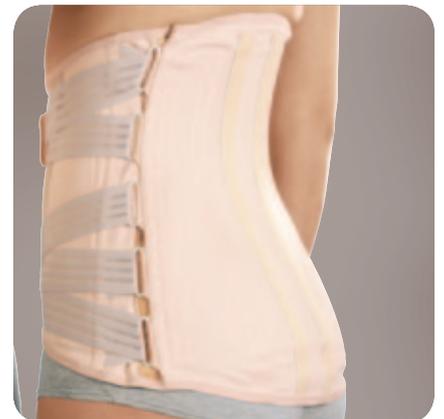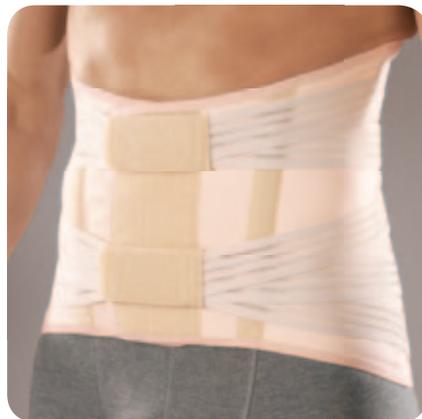


Busto con spallacci

PR1-1335 uomo

PR1-1336 donna

Scopi applicativi

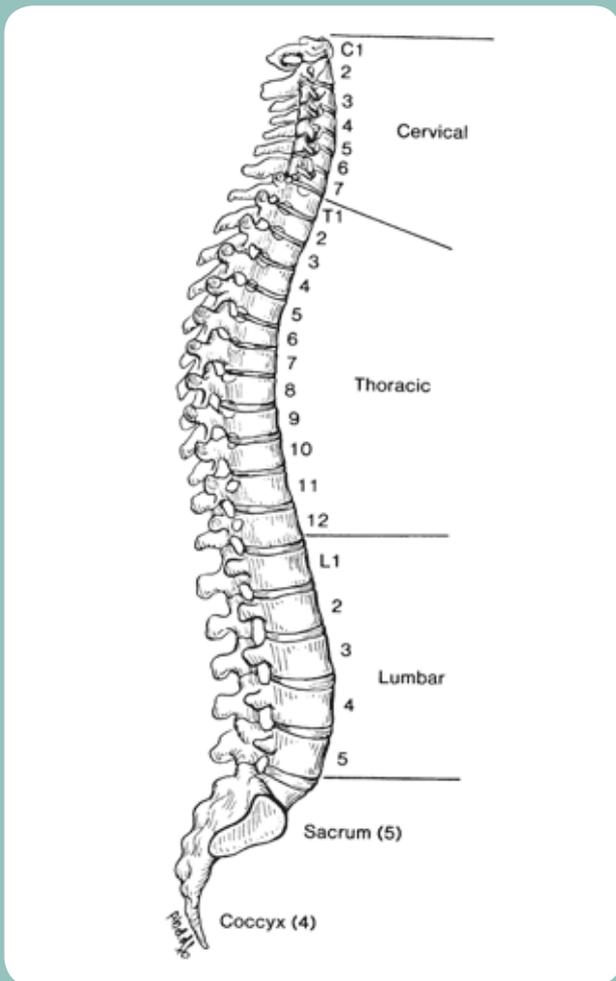

Incrociando i dati sulla valutazione funzionale e posturale del rachide e quelli derivati dall'applicazione sul campo, la ricerca scientifica ha raggiunto nuovi obiettivi.

È ormai evidente che, per offrire sostegno a una colonna vertebrale colpita da patologie degenerative o traumatiche, è fondamentale creare nuove sinergie tra materiali e design.

I busti Sat utilizzano un tessuto traspirante semirigido che, coadiuvato da tiranti in elastico e stecche rigide, determina un significativo aumento della pressione endo-addominale.

Ne deriva una maggiore e più efficace stabilità della colonna.

La particolare architettura strutturale dei tiranti in elastico, che sono dotati di verricelli in serie, consente di ottenere una maggiore compressione a parità di trazione, insieme a una distribuzione omogenea delle forze e a una ottimale adattabilità alla conformazione anatomica individuale.

Indicazioni

PR1-1355 basso (uomo)

PR1-1323 basso (donna)

- Lombalgie da ernia discale
- Discite e spondilodiscite
- Decorso post-operatorio di ernie, laminectomie ed artrodesi basse
- Lombosciatalgie acute e croniche
- Lombosacralgie

PR1-1354 alto (uomo)

PR1-1322 alto (donna)

PR1-1353 addome prominente (uomo)

PR1-1321 addome prominente (donna)

- Spondilartrosi
- Lombalgie da ernia discale e spondilolisi con o senza listesi vertebrale
- Esiti di fratture vertebrali negli anziani
- Cedimenti vertebrali su base osteoporotica o metastatica
- Discite e spondilodiscite
- Decorso post-operatorio di ernie, laminectomie ed artrodesi basse
- Lombosciatalgie acute e croniche
- Lombosacralgie

PR1-1335 con spallacci (uomo)

PR1-1336 con spallacci (donna)

- Dorsalgie su base artrosica o da cifosi
- Esiti di fratture vertebrali dorsali e lombari alte negli anziani
- Cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica

sat

busto semirigido basso con tiranti in elastico

| |
|--------------------------------|
| codice |
| taglia |
| circonferenza bacino cm |
| altezza anteriore cm |
| altezza posteriore cm |

| PR1-1355 (uomo) | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|---------|---------|---------|--|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 70/80 | 80/90 | 90/100 | 100/110 | 110/120 | 120/130 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |

| PR1-1323 (donna) | | | | | | |
|------------------|-------|--------|---------|---------|---------|--|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 75/85 | 85/95 | 95/105 | 105/115 | 115/125 | 120/135 | |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |

busto semirigido alto con tiranti in elastico

| |
|--------------------------------|
| codice |
| taglia |
| circonferenza bacino cm |
| altezza anteriore cm |
| altezza posteriore cm |

| PR1-1354 (uomo) | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|---------|---------|---------|--|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 70/80 | 80/90 | 90/100 | 100/110 | 110/120 | 120/130 | |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |

| PR1-1322 (donna) | | | | | | |
|------------------|-------|--------|---------|---------|---------|--|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 75/85 | 85/95 | 95/105 | 105/115 | 115/125 | 120/135 | |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |

busto semirigido per addome prominente con tiranti in elastico

| |
|--------------------------------|
| codice |
| taglia |
| circonferenza bacino cm |
| altezza anteriore cm |
| altezza posteriore cm |

| PR1-1353 (uomo) | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|---------|---------|---------|--|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 70/80 | 80/90 | 90/100 | 100/110 | 110/120 | 120/130 | |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |

| PR1-1321 (donna) | | | | | | |
|------------------|-------|--------|---------|---------|---------|--|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 75/85 | 85/95 | 95/105 | 105/115 | 115/125 | 120/135 | |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |


busto spallaccio semirigido con tiranti in elastico

| |
|--------------------------------|
| codice |
| taglia |
| circonferenza bacino cm |
| altezza anteriore cm |
| altezza posteriore cm |

| PR1-1335 (uomo) | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|---------|---------|---------|--|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 70/80 | 80/90 | 90/100 | 100/110 | 110/120 | 120/130 | |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |

| PR1-1336 (donna) | | | | | | |
|------------------|-------|--------|---------|---------|---------|--|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 75/85 | 85/95 | 95/105 | 105/115 | 115/125 | 120/135 | |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |

9DCDP00440ITA01

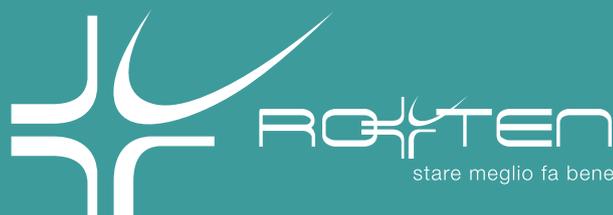

Sede legale: via Fratelli Ruffini, 10 20123 Milano
 Sede operativa e amministrativa: via Monte Cervino, 50 20043 Arcore MB
 tel. +39 039 601 40 94 www.roplusten.com - info@roplusten.com